

helena
Biosciences Europe

V8 ULTRA^{CE}

Akıllı Elektroforez

Yeni Nesil



Güçlü sekiz kanallı kapiler elektroforez analizörü

Hız ve performans sağlayan tamamen otomatik analiz iş akışı.


- › Yeni UltraCE ayırma teknolojisi
- › Mükemmel hassasiyet ve duyarlılık
- › Yeni nesil test kimyaları
- › Otomatik geçiş özellikli birden fazla tampon
- › Otomatik SAS Vitresi entegrasyonu

V8 ULTRA CE



Her V8 UltraCE cihazında, hat (track) tabanlı numune taşıma bağlantısı yerleşik olarak bulunmaktadır.

Otomasyon • Üstün

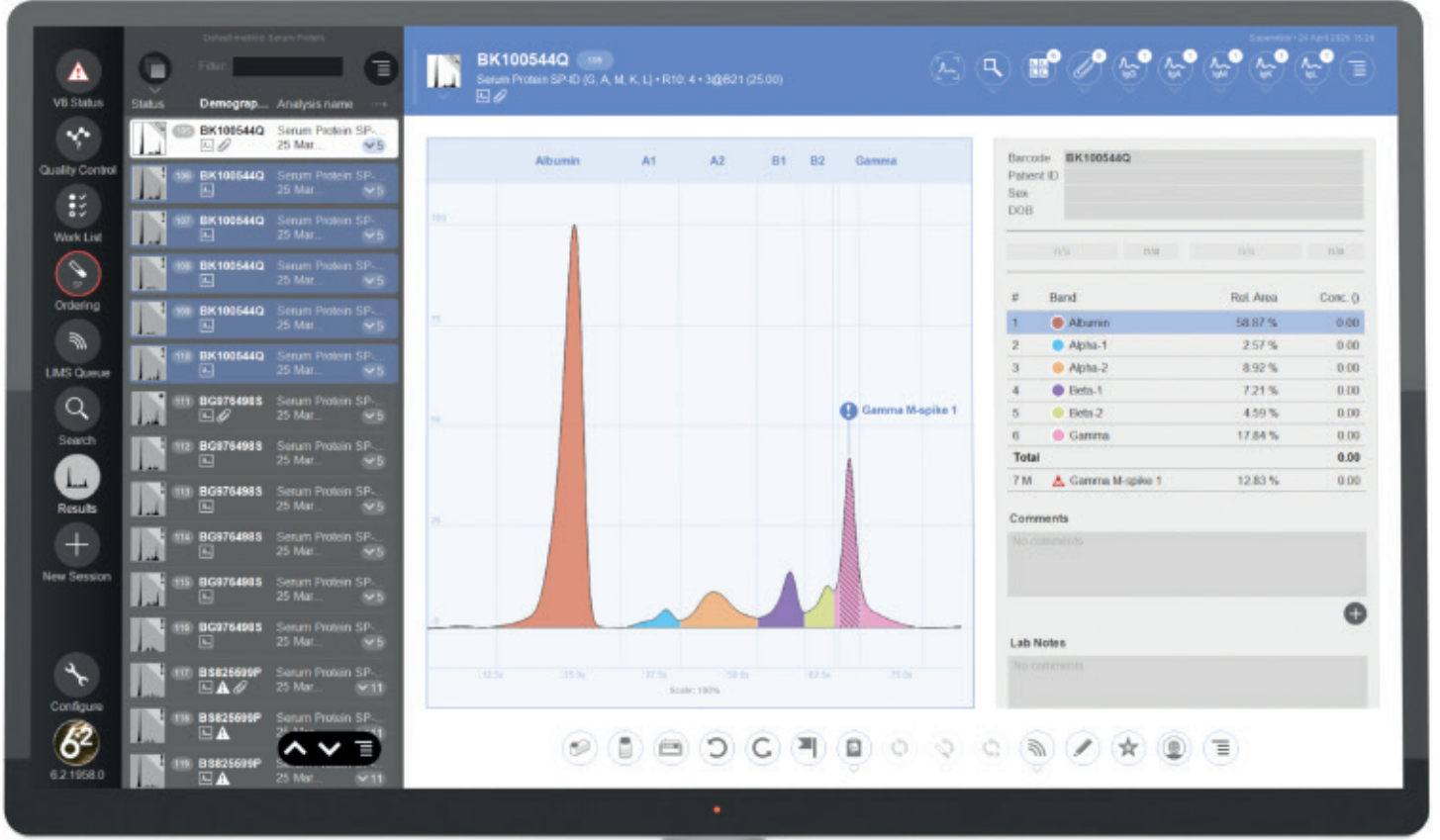


UltraCE Serum Protein sonuçları.

Platinum 6.2: kullanıcı dostu yazılım, tüm klinik veri iş akışınızı yönetir



Tüm klinik iş akışınızı sezgisel dokunmatik ekran kontrolüyle yönetin.

- Hasta sonuçlarının tamamına ilişkin kapsamlı genel görünüm
- Birleştirilmiş kapiler ve jel iş akışı
- Geçmiş verilere anında erişim
- Güçlü karşılaştırma ve raporlama araçları
- Gerçek zamanlı cihaz izleme

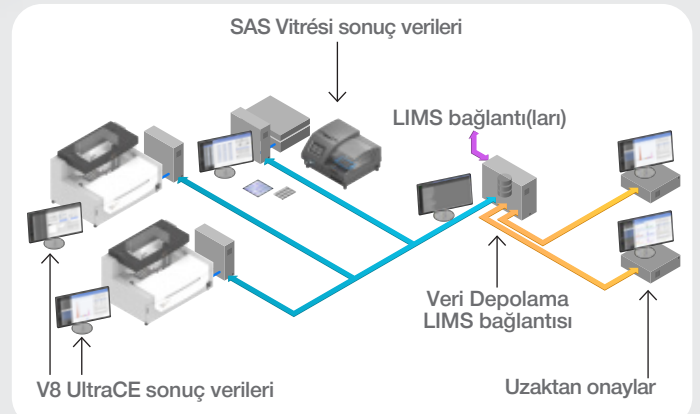

Platinum, güçlü ve ağ tabanlı veri yönetimi iş akışlarını destekler

İş akışı



Images not to scale.

Çok yönlü, yarı otomatik agaroz jel elektroforez sistemi

Basit kullanım ve dokunmatik ekran
kontrolü sunan kompakt jel analizörü.

- › Paralel elektroforez ve boyama
- › Küçük ve büyük jel boyutları için destek
- › Yüksek kaliteli, optimize edilmiş jel seçenekleri
- › Üstün ayrılmış ve kantitatif sonuçlar
- › Kullanımı ve bakımı kolay


SAS vitrésí



Sipariş verme, izleme ve kullanıcı yönlendirmesi için kullanıcı dostu dokunmatik ekran

Sonuçları


Altmış yıllık klinik elektroforez uzmanlığına dayanan üstün bir tanısal iş akışı.

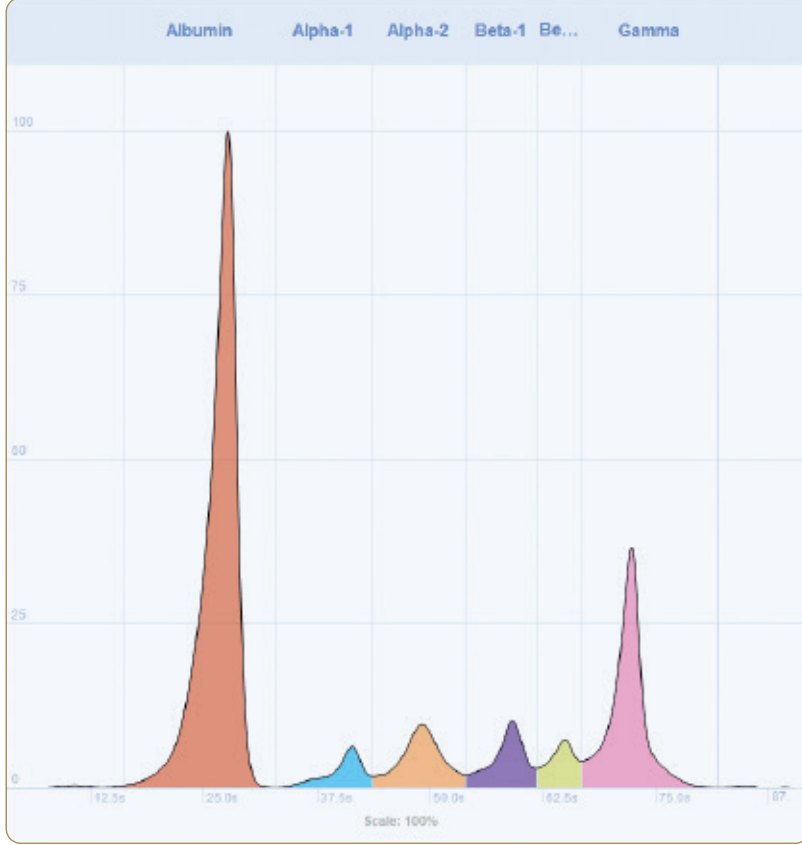

UltraCE Serum Protein sonucu; tarama saatte 80 teste kadar çalıştırılabilir

Jel immünoфикsasyon veya otomatik kapiler immün yer değıştirme ile doğrulama sağlayan hızlı tarama.

- Güvenilir yorumlama ve karar verme için üstün ayırım performansı
- Tek tıklamayla veya otomatik refleks testi
- Tüm jel ve kapiler immünotiplleme sonuçları, ilk tarama sonucuna geri bağlanır
- UltraCE İmmün Yer Değıştirme, IFE'yi mükemmel ve hızlı bir şekilde tamamlayan bir yöntemdir

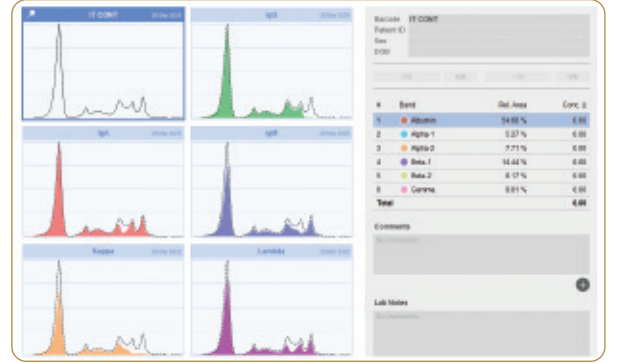

UltraCE Immunodisplacement ile original serum proteini


Altın standart immünotiplleme ile doğrudan entegredir

V8 UltraCE, birincil numune tüplerinden doğrudan saatte 147 IFE seyreltmesini otomatik olarak hazırlar ve taranan jel sonuçlarını Platinum'da ilişkilendirir.

SAS vitrésı



1 V8 UltraCE, numuneleri otomatik olarak seyreltir ve numune tepsisini yükler.

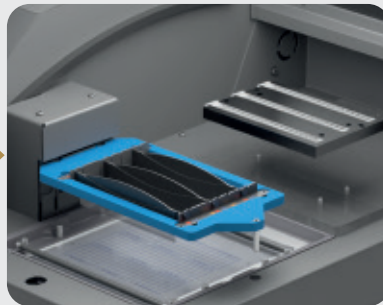

2 Jel elektroforezi ve boyama için numune tepsisi SAS Vitrésı cihazına yerleştirilir.



3 Sonuçlar Platinum yazılımında yeniden birbirine bağlanır.

Temel bilgiler ve rakamlar

8

Yüksek
hızlı kapiler
kanallar

112

Yerleşik
numune tüpü
kapasitesi

80

Saatlik Serum
Proteini test
sayısı

16

Saatlik
İmmünodisplasman
test sayısı

600

Kit başına Serum
Proteini test
sayısı


60

Kit başına
İmmünodisplasman
test sayısı

Eşsiz müşteri desteği

Virtuoso çevrimiçi sanal eğitim

- › Ürün desteği, demonstrasyonlar ve eğitim oturumları için web tabanlı araç
- › V8 UltraCE ve SAS Vitrési sistemleri ve testlerinin 3D simülasyonu
- › Eğitimli personel tarafından yönlendirilen, sorun çözme için güçlü bir çözüm

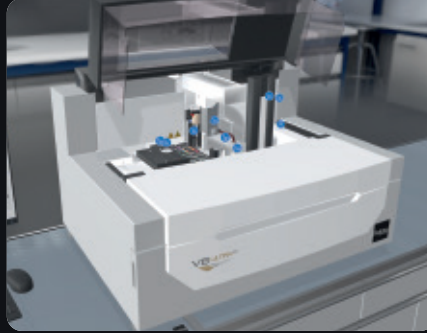

Ürün Portföyü

Cihazlar, yazılım ve V8 UltraCE kitler

Tıp	REF	Açıklama
Cihazlar	V801	V8 UltraCE capillary electrophoresis system
	500010	SAS Vitrési gel electrophoresis system
	500020	SAS Vitrési Starter Kit for Small Gels
	500030	SAS Vitrési Starter Kit for Large Gels
Yazılım	400600	Platinum Software
	400602	Platinum Expert System
	400603	Platinum Middleware
	400604	Platinum Track Connectivity
	400605	Platinum Gateway
UltraCE kitler	V8100	UltraCE Serum Protein
	V130	UltraCE Urine Prep
	V8140	UltraCE Immunodisplacement
Controller	V110	Serum Protein Normal Control
	V120	Serum Protein Abnormal Control
	V150	Immunotyping Control
Sarf Malzeleri	V8010	UltraCE Maintenance Buffer
	V8020	UltraCE Storage Buffer
	V8150	UltraCE IFE Diluent

SAS Vitrési için Jel Kitler

REF	Açıklama	Testler/Jel
200100	SAS-1 SP-24 Kit	24
300100	SAS-3 SP-60 Kit	60
200200	SAS-1 SP-24 SB Kit	24
300200	SAS-3 SP-60 SB Kit	60
200700	SAS-1 High-Res 12 Kit	12
200400	SAS-1 Urine Analysis Kit	24
300400	SAS-3 Urine Analysis Kit	60
200300	SAS-1 IFE-4 Kit	4
300300	SAS-3 IFE-9 Kit	9
300406	Pentavalent Screen Accessory Kit	n/a
200900	SAS-1 Alk Hb Kit	12
201000	SAS-1 Acid Hb Kit	12
200800	SAS-1 Alk-Phos Kit	12
201300	SAS-1 LD Vis Kit	12
201100	SAS-1 Lipo Kit	12
102200	SAS IgG IEF Kit	5
104200	SAS IgG IEF Plus Kit	10
301000	SAS Alpha-1-Antitrypsin IEF Kit	20

Bugün bir demo ayarlayın

www.helenabiosciences.com

Helena Biosciences, Queensway South, Gateshead, NE11 0SD, United Kingdom

helenabiosciences
Biosciences Europe